

I nostri Topic!

Apertura del punto di contatto sicura e veloce

Le nostre sottili lime seghettate sono progettate per evitare qualsiasi taglio dei tessuti molli, davvero efficace per aprire velocemente la zona interprossimale in sicurezza e per tenere sotto controllo il punto di contatto.

1 2 3 4

Delicata correzione / riduzione dello smalto

Strumenti precisi e sicuri con una grana diamantata meno aggressiva, per ridurre sia le sensazioni di vibrazione durante il trattamento, che il tempo di trattamento, quindi più confortevole e totalmente sicuro per il paziente.

Spessori predefiniti da 0.1 a 0.5mm

Definito in base a diverse classi di spessore. Questo per informarla su come rimuovere lo smalto dai denti di un paziente prima ancora di iniziare il trattamento. Rimuovere in modo semplice e sicuro solamente la quantità esatta necessaria di smalto, evitando ogni eccessiva riduzione.

Concessione dell'Istituto di Scienza dei Materiali:
Technische Universität Darmstadt, Germany



Superficie dello smalto non trattata e superficie trattata con Resin PoliStrip
15µm ingrandimento SEM 500x

Perfetta lucidatura finale

Lucidatura finale con PoliStrip per garantire una perfetta lucidatura sulla zona trattata, uniforme, più liscia dello smalto naturale. Nessun problema con la carie.



Come ortodontista eseguo una discreta quantità di IPR ed ho quindi testato molti strumenti diversi per la IPR, ma il sistema Dentasonic per me è davvero una svolta. In ogni parte del sistema (manipoli, metal-strip e resin-strip) è possibile vedere e sentire la qualità svizzera. La grana diamantata delle lime è perfetta per la riduzione interprossimale non invasiva, senza danneggiare lo smalto. Dentasonic è lo standard d'oro nella IPR. Dr. Oliver Liebl / Klammeraffe - KFO

Evitare la riduzione eccessiva dello smalto dei pazienti



DS DENTASONIC SA
Via Piodella 12
CH-6933 Muzzano
Switzerland
Tel. +41 91 600 19 60
info@dentasonic.ch
www.denta-sonic.com

Distributore ufficiale:




OrthoPiù S.r.l.
Viale della Libertà, 14/e
27100 Pavia PV, Italia

Tél. : +39 0382 23267
Info@orthopiu.it
www.orthopiu.it

Rappresentante Europeo: QuaSer S.r.l., Via Pian due Torri, 19, 00146 Roma

Alcuni dei prodotti e delle denominazioni menzionati nel testo sono brevettati o protetti da copyright. L'assenza di un riferimento speciale o del segno ® non deve essere interpretata come l'assenza di protezione del copyright. Questa pubblicazione è protetta da copyright. Tutti i diritti, compresi quelli di traduzione, ristampa e riproduzione (anche sotto forma di estratti) sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o elaborata con sistemi elettronici in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (fotocopie, microfilm o altri metodi) senza il previo consenso scritto dell'editore. Colori e prodotti soggetti a modifiche. Salvo errori di stampa.

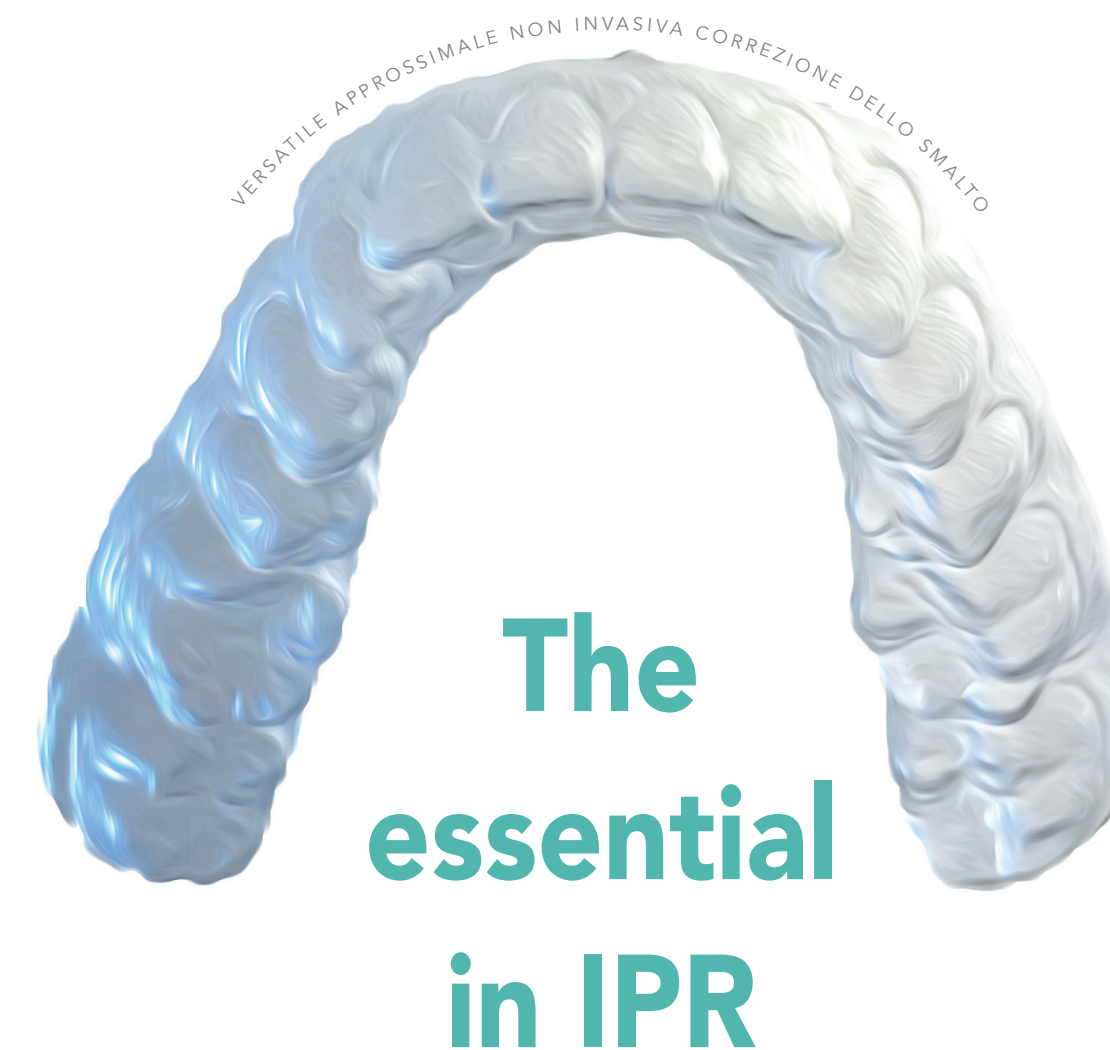


Come eseguirla in totale
sicurezza, precisione, in modo
prevedibile ed affidabile,
e risparmiando tempo prezioso.

L'essenziale

Lime essenziali per un trattamento IPR completo

Ref.:	DSS-01	DSM-02	DSM-03	DSM-04	RDS-05	RPS-15
Utilizzo:	apertura pc	apertura	apertura	apertura	contorno	lucidatura
Apertura:	0.1mm	0.2mm	0.3mm	0.4mm	0.5mm	0.2mm
Grana:	15 micron	25 micron	40 micron	60 micron	60 micron	15 micron AO

prescrizione

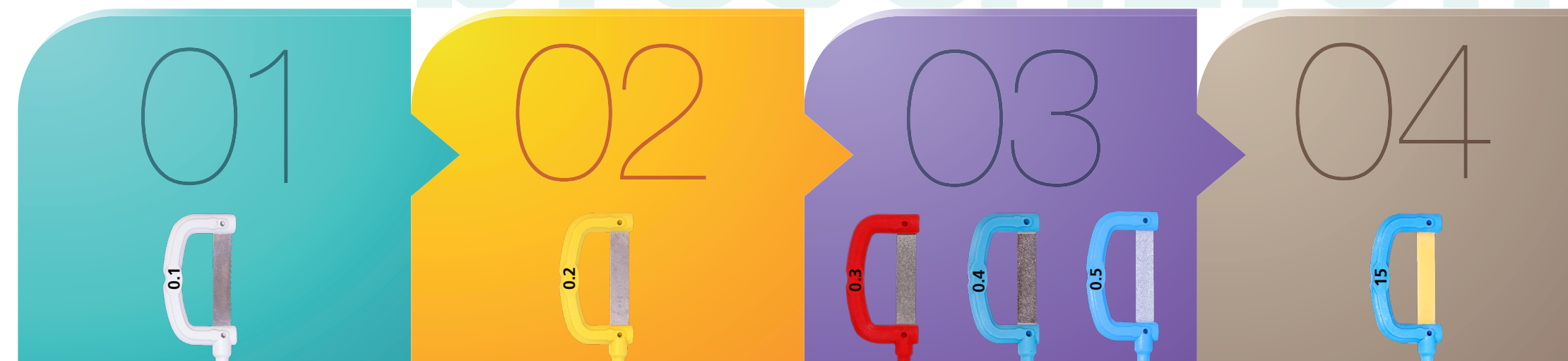

Apertura

Strip metallica da 0.1 mm di spessore e a bassa abrasività (15 micron). Queste caratteristiche, insieme al bordo seghettato, rendono più facile l'accesso alle aree interprossimali.

IPR

Strip metallica da 0.2 mm di spessore e a granulometria intermedia (40 micron) su entrambi i lati. È utilizzata per iniziare a ridurre gradualmente lo smalto interprossimale

IPR attiva

Strips metalliche a granulometria di 60 micron e con spessori variabili di 0.3 e 0.4 mm.

Procedere gradualmente iniziando dallo spessore più piccolo di 0.3 mm, fino ad arrivare allo spazio richiesto dal tuo piano di trattamento.

Finitura e lucidatura

Strip in resina da 0.15 mm di spessore e a bassa granulometria (15 micron) utile a ridurre le irregolarità superficiali create durante le fasi precedenti. La maggiore flessibilità della struttura in resina consente una corretta rifinitura delle superfici interprossimali.

Prescrizione IPR Aligner per dei risultati controllati, sicuri ed affidabili

Avviso: evitare l'utilizzo di grane diamantate troppo aggressive (90, 120 and 150 microns), siccome **distruggono lo smalto!**

come appare

L'IPR Basic Set Aligner per dei risultati sicuri, controllati, prevedibili ed affidabili.



Contenuto:

- 1x DiaSaw 0.1mm
- 1x ogni DiaStrip 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm
- 1x Resin Diastrip 0.5mm
- 3x PoliStrip 15µm
- 1x Manipolo Twist
- 1x Misuratore

2 Anni di Garanzia
Istruzioni d'uso e di manutenzione



Indicazione dello spessore totale della lima

Tutte le lime sono autoclavabili

Tutte le lime si adattano a tutti i manipoli ricambiabili

Possono essere utilizzate per più trattamenti

Le lime in resina sono destinate ad un solo paziente



Ref.: Basic Set Aligner. DSG4A-204-2Y. (2 anni di Garanzia)